

Nouveau HEINE BETA X Ophthalmoscope

L'ophtalmoscope direct le plus avancé de nos 80 ans d'histoire avec l'AOS+ et le nouveau focusCONTROL.

Optimisé pour un retraitement hygiénique

- Fenêtre en verre trempé résistant aux rayures
- SmoothSURFACE et connexion USB-C encastrée

Conception durable, légère et ergonomique

- Cadre en aluminium solide et intégré
- Le boîtier est thermo-moulé à partir d'un mélange spécial de matériaux à fort impact optimisé pour le retraitement hygiénique
- Équilibré avec précision pour une excellente ergonomie et une manipulation sûre

sources d'alimentation intelligentes

- Indicateur d'état de charge
- Fonction d'extinction automatique
- Rechargeable par USB-C ou station de charge

Compensation supérieure de l'erreur de réfraction

Réglage précis de la mise au point par 74 dioptries de -36D à +38D

Roue de contrôle de l'éclairage intelligente contrôlée par microprocesseur

- Utilisation simple, à l'aide d'un seul pouce
- Tourner la molette rapidement pour modifier rapidement l'intensité de l'éclairage
- Tourner la molette lentement pour un réglage précis de l'intensité de l'éclairage
- Gradation continue entre 1 et 100 %
- Appuyer sur la molette pour on/off
- S'allume toujours sur le dernier réglage d'intensité de l'éclairage utilisé.



HEINE BETA X

Ophthalmoscope

Des images claires et nettes du fond d'œil grâce au nouveau système optique AOS+ et à la LED^{HQ}

- Le système optique asphérique AOS+ est encore plus efficace pour réduire les reflets cornéens grâce à la séparation optimisée des chemins d'éclairage et d'observation
- Eclairage LED^{HQ} pour un éclairage homogène et lumineux avec un rendu fidèle des couleurs pour un contraste élevé et des vues extrêmement détaillées
- Le système optique est scellé pour le protéger de la poussière

Le nouveau filtre polarisant pivotant

Selon les besoins et l'objectif de l'examen :

- **Avec polarisation** : Réduit les reflets dans la cornée et la lumière parasite
- **Sans polarisation** : Réflexe mural (réflexe maculaire) et réflexe lumineux artériolaire rétinien (fils de cuivre et d'argent) clairement visibles.




Données du produit
(en anglais)



7 ouvertures différentes

Toutes les ouvertures peuvent également être utilisées avec des filtres anti-rouge et des filtres polarisants.

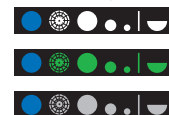

Le nouveau HEINE focusCONTROL

Changement facile de la mise au point entre le segment antérieur de l'œil et le fond de l'œil



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

03|25. A-000.00.274 EN

QUALITY
MADE IN GERMANY



Vision Equipment Technology

6 avenue des mateirons, 74500 Evian
les Bains, France
www.dermoscopie.fr

